

Error Codes and Symbols:

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	Low Battery—when battery symbol remains on display screen during testing.	Replace the battery as soon as possible.
	Temperature out-of-range.	Move to an area that is within the operating range for the meter: 5°C–45°C. Let the meter and test strips adjust to this temperature for twenty minutes before testing.
	The test strip has not filled enough to give an accurate result.	Remove the test strip and repeat the test using a new test strip.



CE 0088 Manufacturing site / 製造廠:
110 Oaza-Inoshiri-aza-Nishiueno,
Wakimachi, Mima, Tokushima,
JAPAN 779-3603

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Meien-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

For information on patents,
and related licenses, see:
www.patents.ascensia.com

Refer to your user guide for complete instructions including troubleshooting and error information

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	The meter is sensing a used test strip.	Remove the test strip and retest using a new test strip. Wait until you see the flashing blood drop in the display before adding the blood sample.
	Test strip not inserted correctly.	Remove the test strip and insert it properly.
E5 E6 E8 E9	E10 E11 E12 E13	Potential software or hardware issue.
		Remove the test strip and retest using a new test strip. If you continue to have problems, contact Customer Service.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Clinlog, Contour, Glucofacts, and the No Coding logo are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

WHAT YOU SEE	WHAT IT MEANS	WHAT YOU SHOULD DO
	Wrong test strip.	Remove the test strip and retest using a CONTOUR®TS test strip.
	Test result is "HI" (above 33.3 mmol/L)	Wash your hands and the test site. Repeat the test using a new test strip.
	Test result is "LO" (below 0.6 mmol/L).	If your result is still "HI" or "LO," contact your physician or health care professional immediately.

CAUTION: Glucose levels above 13.9 mmol/L or below 2.8 mmol/L may indicate a potentially serious medical condition.

Ascensia Diabetes Care
Hong Kong Limited
Unit Nos. 12-13, Level 31, Tower 1,
Millennium City 1
No. 388 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: (852) 8100 6386
Fax: (852) 2320 7022

Ascensia Diabetes Care
Singapore Pte Ltd
600 North Bridge Road
#06-01 Parkview Square
Singapore 188778
Tel: +65 6202 4270
Email: diabetescare@ascensia.com

Ascensia Diabetes Care
Malaysia Sdn Bhd
Lot 2-2, Level 2, Tower B
The Troika
19 Persiaran KLOEC
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: (60) 3 2178 6162

www.diabetes.ascensia.com

©2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Rev. 06/17

Contour®
Blood Glucose Monitoring System **TS**

QUICK REFERENCE GUIDE
Read your user guide and lancing device insert for complete instructions before performing a blood glucose test.

NO CODING

錯誤代碼及符號:

顯示的代碼及符號	代表的意義	您應該採取的措施
	電力不足—測試過程中顯示螢幕持續出現電池符號。	儘快更換電池。
	超出正常檢測的溫度範圍。	將血糖測試儀移到正常測試溫度範圍的地方: 5°C–45°C。 進行測試前, 先讓血糖測試儀與測試紙適應當時溫度約 20 分鐘。
	測試紙上的血樣不足, 無法測試出正確的結果。	把測試紙取出, 用新的測試紙再測試一次。


CE 0088 Manufacturing site / 製造廠:
110 Oaza-Inoshiri-aza-Nishiueno,
Wakimachi, Mima, Tokushima,
JAPAN 779-3603

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Meien-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

如有關專利和相關許可的資訊,
請瀏覽:
www.patents.ascensia.com

請參考使用指南內的完整指示, 包括解決問題及錯誤分析資訊。

顯示的代碼及符號	代表的意義	您應該採取的措施
	血糖測試儀感應出這張測試紙已經使用過。	把測試紙取出，用新的測試紙再測試一次。等您看到閃爍的血滴符號顯示在螢幕上，再加入血液樣本。
	沒有正確插入測試紙。	把測試紙取出，重新正確插入。
E5 E6 E8 E9	E10 E11 E12 E13	軟體或硬體可能有問題。
		把測試紙取出，用新的測試紙再測試一次。如果仍舊出現問題，請聯絡客戶服務部。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 標誌、Clinlog、Contour、Glucofacts 和 No Coding (免調碼) 標誌是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG (健緯醫療保健控股公司) 的商標和/或註冊商標。

顯示的代碼及符號	代表的意義	您應該採取的措施
	錯誤的測試紙。	把測試紙取出, 用拜安康™測試紙再測試一次。
	測試結果為「HI」(超過 33.3 mmol/L)	清洗雙手及測試部位, 然後用新的測試紙再檢測一次。
	或「LO」(低於 0.6 mmol/L)。	假如顯示的結果還是「HI」或「LO」, 請立刻與您的醫師或專業醫護人員聯絡。

注意: 血糖值若超過 13.9 mmol/L 或低於 2.8 mmol/L, 即表示健康狀況可能有嚴重的問題。

健緯醫療保健香港有限公司
九龍觀塘道388號
新紀之城第一期一座31樓
12-13室
電話: (852) 8100 6386
傳真: (852) 2320 7022

Ascensia Diabetes Care
Singapore Pte Ltd
600 North Bridge Road
#06-01 Parkview Square
Singapore 188778
Tel: +65 6202 4270
Email: diabetescare@ascensia.com

www.diabetes.ascensia.com

©2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG (健緯醫療保健控股公司)。保留所有權利。


85718703
Rev. 06/17

拜安康™
血糖監測系統

快速參考指南
測試血糖之前, 請先閱讀隨盒附上的《使用指南》和《採血器使用說明》, 以取得全面的使用指示。

免調碼

Your CONTOUR®TS Meter:

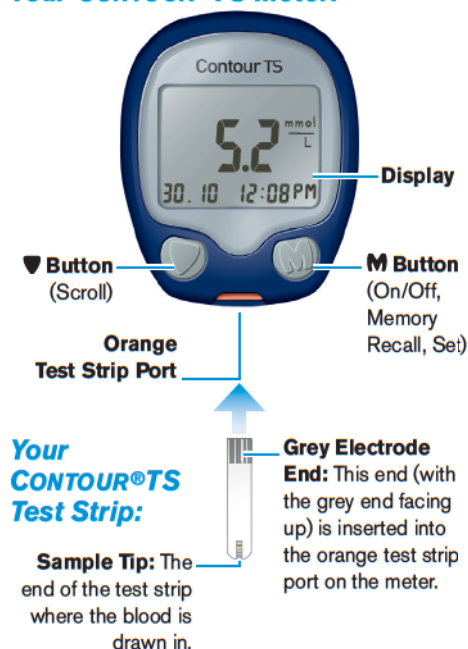

Your CONTOUR®TS Test Strip:

Sample Tip: The end of the test strip where the blood is drawn in.


- Always wash your hands well with soap and water before and after testing, handling the meter, lancing device or test strips.
- The lancing device provided with your kit is intended for self testing by a single patient. It must not be used on more than one person due to the risk of infection.

Inserting the Test Strip:

Remove a test strip from the bottle and **firmly snap the lid closed. Never store test strips outside the bottle!**

Hold the test strip with the grey end facing up and insert it into the orange test strip port. **No coding required!**

A test strip with a flashing blood drop will appear letting you know the meter is ready to test.

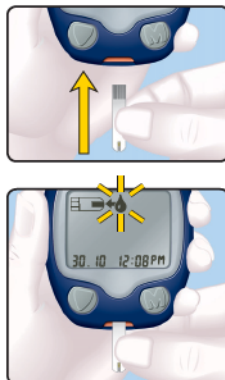


Getting the Blood Drop:

Press the lancing device firmly against the puncture site and press the release button.



The lancing device graphics are for illustration purposes only.


Test immediately after you have formed a blood drop. Only 0.6 µL is needed for a test.

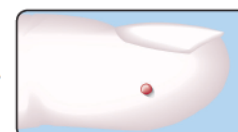

Suggested Actual Drop Size

Testing Your Blood:

Hold the meter with the orange test strip port pointing down or toward you. Immediately touch the **tip** of the test strip to the drop of blood. The blood is drawn into the test strip through the tip.

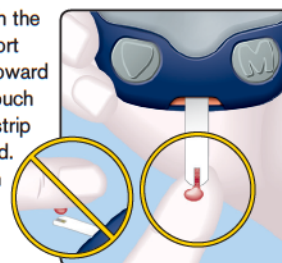

Hold the tip of the test strip in the blood drop until the meter beeps and the 5 second countdown begins.



To turn your meter off, simply remove the test strip. Dispose of the test strip as medical waste or as advised by your health care professional.



To remove the lancet from the lancing device refer to the detailed instructions in the lancing device insert.

For further assistance please contact your local Ascensia Diabetes Care agency.
www.diabetes.ascensia.com

您的拜安康™血糖測試儀：



您的拜安康™測試紙：


- 在檢測或處理血糖測試儀、採血器或測試紙之前和之後，請務必用肥皂和清水清洗雙手。
- 您的套件隨附的採血器只供單一病人自我測試使用。由於可能造成感染風險，不得用於超過一人。

插入測試紙：

從瓶中取出一張測試紙，然後牢牢地將蓋子鎖緊。請勿將測試紙存放在瓶外。

讓灰色端朝上，將測試紙插入血糖測試儀的橙色測試紙入口內。不需做調碼的步驟！

螢幕上會出現測試紙符號，且旁邊會有閃爍的血滴符號，告知您已經可以使用血糖測試儀進行測試。

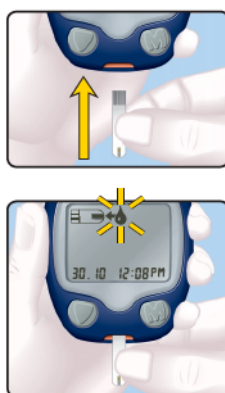


取得血樣：

將採血器緊貼於欲採血的位置，並按下釋放按鈕。



採血器圖形僅供說明之用。


血樣形成後，請立刻用於測試。一次測試只需要 0.6 µL。

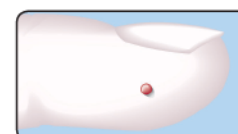

建議實際血滴大小

測試血液：


握住血糖測試儀，橙色測試紙入口向下或向您。立刻讓測試紙末端接觸血滴。血滴會從測試紙末端被吸取。

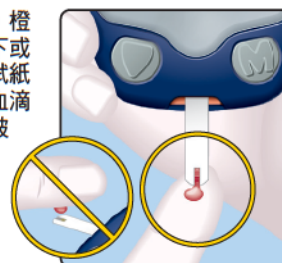

將測試紙末端放在血滴裡，直到血糖測試儀發出“嗶嗶”聲，而且開始計時倒數 5 秒。



只要取出測試紙，就能關閉血糖測試儀的電源。將測試紙作為醫療廢棄物處置或按您的醫療專業人員所建議處置。

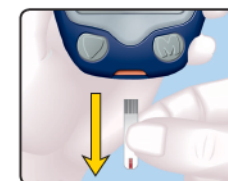

要將採血針從採血器取出，請先閱讀採血器使用說明，以取得詳細的使用指示。

如需進一步的協助，請聯絡您當地的 Ascensia Diabetes Care 代理商。
www.diabetes.ascensia.com